

Componenti Contours VPS3

| Placche lato sinistro | | |
|-----------------------|-----------|-------------|
| Codice | Larghezza | Lunghezza |
| VPL0401CE | Stretta | Corta |
| VPL0402CE | Stretta | Lunga |
| VPL0403CE | Standard | Corta |
| VPL0404CE | Standard | Lunga |
| VPL0405CE | Standard | Extra Lunga |
| VPL0406CE | Larga | Corta |
| VPL0407CE | Larga | Lunga |

| Viti bloccate parzialmente filettate D. 2.4mm | |
|---|----------------|
| Codice | Lunghezza vite |
| PSC24P12TCE | 12mm |
| PSC24P14TCE | 14mm |
| PSC24P16TCE | 16mm |
| PSC24P18TCE | 18mm |
| PSC24P20TCE | 20mm |
| PSC24P22TCE | 22mm |
| PSC24P24TCE | 24mm |

| Viti non bloccate completamente filettate D. 2.4mm | |
|--|----------------|
| Codice | Lunghezza vite |
| PSC2412TCE | 12mm |
| PSC2414TCE | 14mm |
| PSC2416TCE | 16mm |
| PSC2418TCE | 18mm |
| PSC2420TCE | 20mm |

| Viti bloccate parzialmente filettate D. 2.7mm | |
|---|----------------|
| Codice | Lunghezza vite |
| PSC2712TCE | 12mm |
| PSC2714TCE | 14mm |
| PSC2716TCE | 16mm |
| PSC2718TCE | 18mm |
| PSC2720TCE | 20mm |
| PSC2722TCE | 22mm |
| PSC2724TCE | 24mm |
| PSC2726TCE | 26mm |

| Viti non bloccate completamente filettate D. 3.5mm | |
|--|----------------|
| Codice | Lunghezza vite |
| PSC35D10CE | 10mm |
| PSC35D12CE | 12mm |
| PSC35D14CE | 14mm |
| PSC35D16CE | 16mm |
| PSC35D18CE | 18mm |

NOTA: tutti i componenti impiantabili sono disponibili anche in confezione singola e sterile.

Sono prodotti da Orthofix Srl e possono essere ordinati utilizzando gli stessi codici sopra indicati, preceduti da 99- (ad es. 99-VPL0401CE).

Tuttavia, i componenti sterili possono non essere disponibili in tutti i paesi, pertanto si consiglia di consultare il proprio rappresentante locale.

| Placche lato destro | | |
|---------------------|-----------|-------------|
| Codice | Larghezza | Lunghezza |
| VPR0501CE | Stretta | Corta |
| VPR0502CE | Stretta | Lunga |
| VPR0503CE | Standard | Corta |
| VPR0504CE | Standard | Lunga |
| VPR0505CE | Standard | Extra Lunga |
| VPR0506CE | Larga | Corta |
| VPR0507CE | Larga | Lunga |

| Viti bloccate parzialmente microfilettate D. 2.0mm | |
|--|----------------|
| Codice | Lunghezza vite |
| PSC2012TCE | 12mm |
| PSC2014TCE | 14mm |
| PSC2016TCE | 16mm |
| PSC2018TCE | 18mm |
| PSC2020TCE | 20mm |
| PSC2022TCE | 22mm |
| PSC2024TCE | 24mm |

VP701CE CONTOURS VPS-3 CASSETTA DI STERILIZZAZIONE VUOTA

Può contenere:

| Strumentario | |
|--------------|---|
| Codice | Descrizione |
| DH0455CE | Impugnatura con attacco rapido |
| DH0429CE | Impugnatura per avvitatore esagonale da 1.5mm |
| DH0422CE | Chiave esagonale a "L" da 1.5mm |
| DH0459CE | Avvitatore esagonale da 2.5 mm con attacco rapido |
| DH0452CE | Attacco a trattenuta vite per avvitatore esagonale da 2.5mm |
| DH0437CE | Avvitatore esagonale da 1.5mm con attacco rapido |
| DH0478CE | Attacco a trattenuta vite per avvitatore esagonale da 1.5mm |
| DH0413CE | Modella placca filettato |
| DH0412CE | Modella placca retto |
| DH0416CE | Guida perforatore D. 2.5mm |
| DH0463CE | Divaricatore Hohmann 6mm |
| DH0472CE | Divaricatore Hohmann 8mm |
| DH0450CE | Misuratore di profondità 50mm |
| DH0460CE | Filo di Kirschner D. 1.4mm, L. 127mm |
| DH0436CE | Punte perforatore D. 2.5mm |
| DH0448CE | Punta perforatore D. 2mm |
| DH0451CE | Guida perforatore D. 2mm |
| DH0471CE | Punta perforatore D. 1.6mm |
| DH0470CE | Guida perforatore D. 1.6 mm |
| DH0462CE | Pinza a punta per riduzione ossea |
| DH0461CE | Pinza seghettata da riduzione ossea |

VP700CE CONTOURS VPS-3 CASSETTA DI STERILIZZAZIONE, COMPLETA



Contours **VPS[®]3**
VOLAR PLATING SYSTEM



Fit for Perfection

Distributore:


Orthofix Srl
Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370

EC REP European Representative
Orthofix Srl.
Via delle Nazioni 9
37012 Bussolengo (VR) Italia
39 045 671 9000 Fax 39 045 671 9380

Prodotto da:
Orthofix Inc.
3451 Plano Parkway
Lewisville, Texas 75056 U.S.A.



Placca disponibile in numerose misure

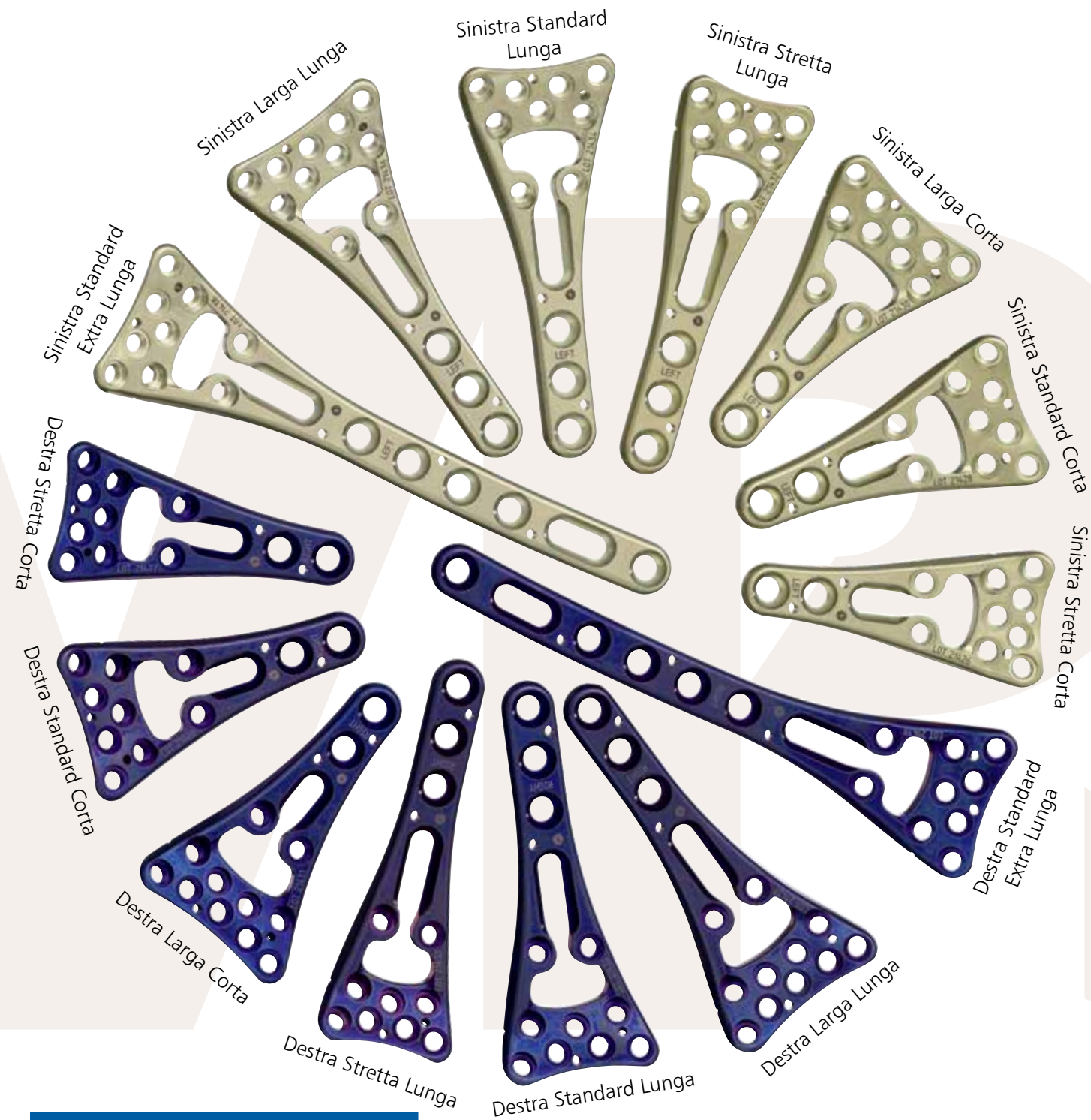


| DIMENSIONI PLACCA - SINISTRA E DESTRA | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | Lunghezza | Larghezza |
| Stretta, Corta | 50.7mm | 23.1mm |
| Stretta, Lunga | 65mm | 23.1mm |
| Standard, Corta | 50.7mm | 26.5mm |
| Standard, Lunga | 65mm | 26.5mm |
| Standard, Extra Lunga | 101.5mm | 26.5mm |
| Larga, Corta | 50.7mm | 30mm |
| Larga, Lunga | 65mm | 30mm |

Lo spessore medio della placca è pari a 2.3mm (sezione distale) e a 3.4mm (sezione prossimale)

Sistema completo di placche volari anatomiche con viti a stabilità angolare

Foro da 1.4mm per filo di Kirschner per impedire alle viti di attraversare l'articolazione radio-carpale.

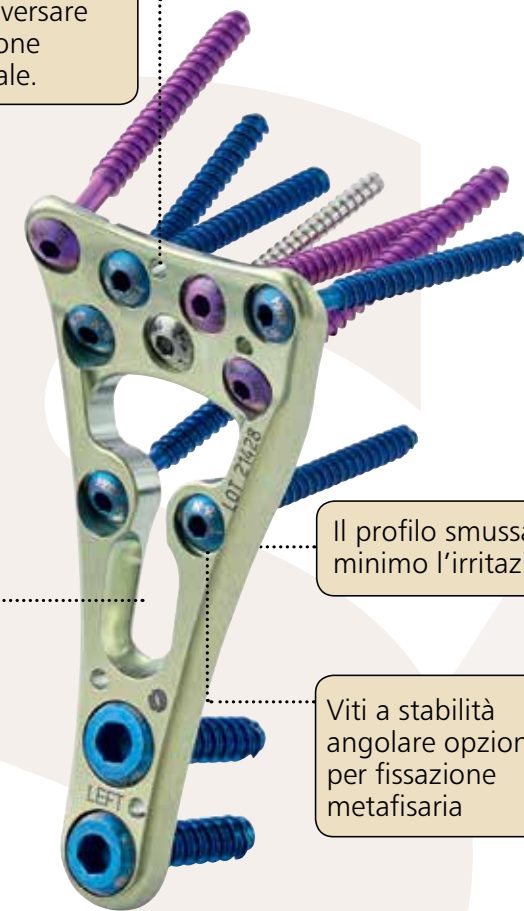

Il profilo smussato riduce al minimo l'irritazione

Viti a stabilità angolare opzionali per fissazione metafisaria

Il design a "chiave" permette di ottenere un foro prossimale oblungho e una "finestra" per visualizzare la frattura ed effettuare un eventuale innesto



La superficie volare è studiata in modo da adattarsi alle differenti anatomie di diversi pazienti, ottenendo un migliore allineamento all'interfaccia osso-placca

Configurazione delle viti convergenti per un ottimo sostegno subcondrale



L'angolo flessibile permette di adattare la placca allo stiloide radiale in modo ottimale



Strumentario funzionale e completo per accelerare i tempi d'intervento

Viti con codice colore in funzione delle diverse caratteristiche



Guida per la misurazione

Non è possibile sbagliare la posizione delle viti: tutte le viti hanno fori dedicati conformi alle rispettive lunghezze



Sede progettata perché le viti siano leggermente sporgenti per facilitare la presa con l'avvitatore o con i guanti

Ampia scelta di viti



Vite bloccata parzialmente filettata D. 2.0mm
 Vite bloccata parzialmente filettata D. 2.4mm
 Vite bloccata parzialmente filettata D. 2.7mm
 Vite non bloccata completamente filettata D. 2.4mm
 Vite non bloccata corticalmente completamente filettata D. 3.5mm